

LELO

LELO Beads™

ANVÄNDARHANDBOK



**EN STARKT BÄCKENBOTTEN KAN GÖRA
ENORM SKILLNAD.
TRÄNA KLOKT, OFTA OCH MED OMSORG.**

Grattis till köpet av LELO Beads. Innan du gör dig närmare bekant med dem, var god ta en stund till att titta igenom denna användarhandbok.

KOMMA IGÅNG

Alla kvinnor är olika. Det är därför som LELO Beads finns i olika storleksvariationer: mini, classic och plus. LELO Beads Mini har utformats särskilt för kvinnor under 30 år som inte har fött barn, LELO Beads Classic rekommenderas för de över 30, samt för de som har fött barn, medan LELO Beads Plus är perfekta för kvinnor som vill utmana sin bäckenbottenmuskulatur ytterligare med tyngre vikter.


Varje set av LELO Beads består av en silikonhållare och fyra eller sex viktade kulor. När de används individuellt eller kombinerat med silikonhållaren, ger LELO Beads ett enkelt och effektivt sätt att optimera träningen av din bäckenbotten.

LELO Beads Noir är vår sensuella version av den här storsäljaren, utformad att användas under förspel, eller som din egen lilla hemlighet när du är ute en kväll med din partner. De består av 2 viktade kulor (37 gram) i minsta storleken som kan kombineras med en svart silikonhållare.

Vänligen notera att detta endast är riktlinjer. Till exempel är LELO Beads Mini ofta att föredra för kvinnor som börjar att nå klimakteriet, medan de ursprungliga LELO Beads ibland föredras av yngre kvinnor som just har börjat träna med knipkulor.


Rådfråga din läkare innan du använder LELO Beads vid graviditet.

LÄR KÄNNA DINA LELO Beads

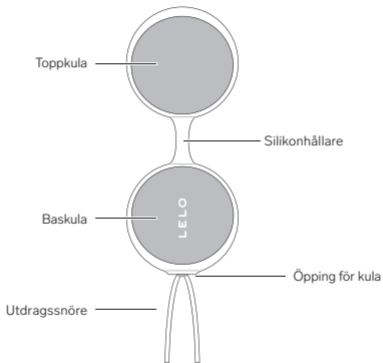

ANVÄNDA LELO BEADS

- Hur man håller

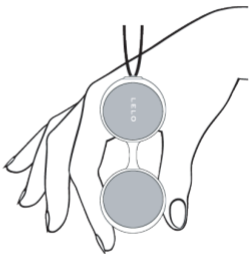

• Hur man för in

Att föra in LELO Beads™ är inte helt olikt hur man använder en tampong. Men, eftersom LELO Beads har en bredare omkrets kan man behöva finslipa tekniken lite.

1. Använd LELO Personal Moisturizer på den övre delen av kulan/kulorna du vill använda, för att förenkla införandet. Undvik att använda för mycket glidmedel då det gör kulorna svårare att hålla på plats.
2. Ligg på rygg och för in den övre kulan med ett fast men försiktigt tryck. Om du upplever det svårt kan du lyfta höfterna för att låta gravitationen hjälpa dig. Vissa kvinnor upplever att det är enklare att stå upp och höja ett ben.
3. Om du använder två kulor och silikonhållaren, för in toppkulan först. På grund av avståndet mellan de två kulorna och silikonhållaren kommer musklerna i slidan att försöka putta utåt innan du kan föra in baskulan. Andas djupt och slappna av så hjälper du båda kulorna in.

• Placering



RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

- Användning av LELO Beads med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klabbigt.
- LELO Beads är helt vattentäta, vilket gör rengöringen enkel. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj igen och låt torka.
- Montera alltid isär och rengör varje del av dina LELO Beads noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med hett vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.
- Undvik att lämna dina LELO Beads i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem hetta. Förvara dina LELO Beads på en dammfri plats, och håll den borta från produkter i andra material.

SPECIFIKATIONER

Material

Kroppssäker ABS-plast och silikon

HÅLLARENS STORLEK

Classic/ Plus: 89 x 35 x 16 mm / 3.5 x 1.3 x 0.6 In

Mini: 73 x 31 x 15 mm / 2.8 x 1.2 x 0.59 In

Noir: 73 x 31 x 15 mm / 2.8 x 1.2 x 0.59 In

KULSTORLEK

Mini: Diameter 29 mm / 1.14 In

Noir: Diameter 29 mm / 1.14 In

VIKTER

2 x 28 gr / 0.06 lb (Petal Pink)

2 x 37 gr / 0.08 lb (Powder Blue)

2 x 60 gr / 0.13 lb (Amethyst Purple)

Noir: 2 x 37 gr / 0.08 lb (Black)

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din tidsbegränsade 1-årsgaranti ange numret som medföljde ditt äkthetsbevis från LELO, på LELO.COM/SUPPORT

1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin gäller fel som uppkommit på grund av hantverksfel eller material. Garantin täcker arbetande delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE synlig nedbrytning som orsakats av rimlig användning, slitage eller skador orsakade av misstag, felanvändning, eller underlåtenhet att underhålla produkten. Inga försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) kommer att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, ersätta njutningsobjektet, kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimligt bevis för att datumet då anspråket görs är inom garantiperioden. För att godkänna din garanti behöver du behålla kvittot från ditt ursprungliga inköp, tillsammans med dessa garantivillkor, så länge garantiperioden gäller.

För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnader är inte återbetalbara. Detta åtagande är i enlighet med konsumentens regelmässiga rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingsystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Ansvarsfriskrivning: Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare åtar sig några skyldigheter eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar eller ändringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

Alla förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av, för maskinen, ansvariga parter, kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen. Den här enheten är överensstämmande med del 15i FCC-reglerna. Användningen lyder under följande två villkor: (1) Den här enheten kan inte skapa skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Uttalande om RF-exponering: Den här utrustningen är överensstämmande med FCC:s gränsvärden för strålning förutsatt en okontrollerad miljö. Den här enheten har utvärderats att möta de allmänna kraven för RF-gränsvärden. Enheten kan användas under portabla exponeringsvillkor, utan restriktion.

© 2021 LELOI AB. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE.

UTFORMAD OCH UTVECKLAD AV LELO SWEDEN.

TILLVERKAD FÖR LELO I KINA

HEMSIDA: WWW.LELO.COM

SUPPORT: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com